

Dornier Medilas H Solvo

Litotripsi için Mobil Holmium Lazer




Dornier Medilas H Solvo

Taş Tedavisinde Yenilik

Yenilikçi yer tipi 30 Watt'lık **Medilas H Solvo**, kanıtlanmış 2,1 µm dalga boyuyla Dornier'in gelecek nesil holmium lazeridir. Bu sistem, kimyasal tutarlılık ve sertliğe bakılmaksızın taşların yok edilmesinin yanı sıra Androlojide belirli yumuşak doku müdahaleleri için de idealdir. Geniş enerji ve frekans ayarı aralıkları, kullanıcının, tedavi stratejisini, hızlı ve kaba fragmentasyondan taşın tamamen pulverizasyonuna kadar ayarlamasına izin verir.

30 Watt maksimum güç ile, mesane veya böbrekteki daha büyük taşlar da etkili biçimde tedavi edilir.

Yeşil renkteki nişan alma ışını, yeni üç anahtarlı ayak pedalı ve akıllık fiber tanıma sistemiyle **Dornier Medilas H Solvo**, ürolojik ameliyathanede ideal bir yardımcıdır.

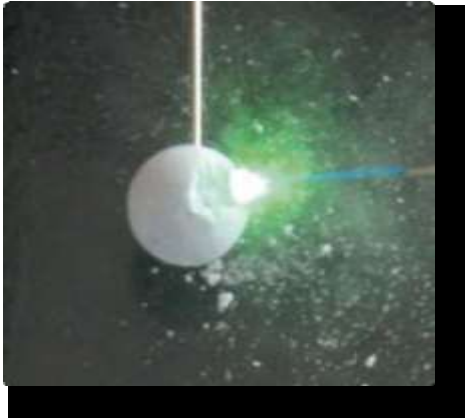

Dornier MedTech, üriner taşlar için minimal invazif tedavi yöntemini sunan ilk üretici olmasına ek olarak holmium lazer teknolojisinde neredeyse 20 yıla varan tecrübesiyle, taş tedavileri spektrumunun tamamını kapsar.

Her Türlü Ayar için İdeal

Sınıftaki yerden en çok tasarruf sağlayan cihaz olan yer tipi **Medilas H Solvo**, tekerlekler üzerine monte edilmiştir, standart bir prize takılır, özel su veya diğer malzemelere ihtiyaç duymaz ve gerektiğinde zahmetsizce yeri değiştirilerek herhangi bir ameliyathaneye alınabilir. Normal ameliyathane ortamında hiçbir ısınma süresi gerektirmeyen sistem, açıldıktan sonra hemen kullanılabilir.




Litotripside Mükemmellik

Kullanıcı Dostu Tasarım

İş akışını optimize eden **Medilas H Solvo**'nun yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı, geniş, renkli, grafiksel kullanıcı arayüzüyle sezgisel çalışma sağlar. Kullanıcı tanımlı protokol ayarları kaydedilebilir ve gerektiğinde kolaylıkla erişilebilir.

Yeşil nişan alma ışınıyla artırılmış endoskopik görünürlük ve kontrast, problemsiz cerrahi prosedürlere imkan tanır. Buna ek olarak, cihazın arkasında bulunan akıllı aksesuar bölmesi, lazer aksesuarlarının depolanması için tasarlanmıştır.

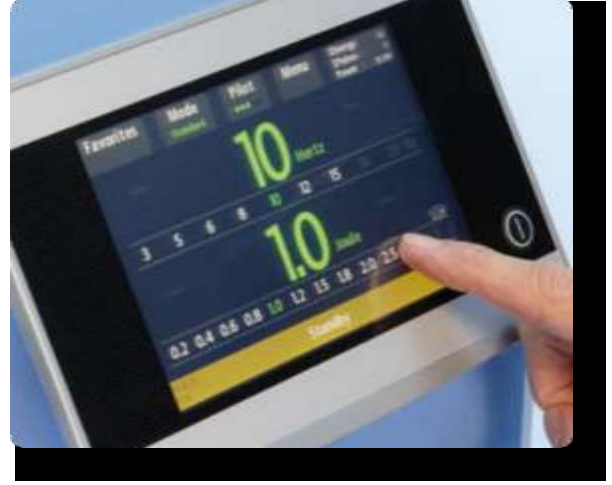

Eller Serbest Kontrol

Kablolu veya kablosuz modelde mevcut yeni üç anahtarlı ayak pedalı, cerrahın Dornier **Medilas H Solvo**'yu steril alandan kullanmasına izin vererek, lazer parametrelerini değiştirmek için ek personel ihtiyacını ortadan kaldırır.

Artırılmış esneklik aynı zamanda, operatörün, lazerin bekleme ve hazır modları veya parametreleri arasındaki kolaylıkla geçiş yaparken, prosedüre konsantre olmasını sağlar. Ayak pedalı, kolay temizliğe izin veren, neredeyse kusursuz bir tasarıma sahip, paslanmaz bir malzemedir.

Akıllı İletim Sistemi

Akıllı fiber tanıma sistemi içeren Dornier **Medilas H Solvo**, kullanıcıya, bağlı fiber hakkında anlık bilgi sağlar. Sistemin güvenilirliğini artıran Dornier'in yüksek kaliteli holmium fiberleri, etkili taş tedavisinde kilit faktörlerden biridir ve kuvars halka tasarım fiber teknolojisi, bakım gerektiren patlama kalkını gereksinimlerini ortadan kaldırır. Çeşitli fiber göbek çaplarında mevcut Dornier holmium fiberler, hem tek kullanımlık hem de yeniden kullanılabilir modellerde sunulmaktadır.



Dornier Medilas H Solvo'nun Avantajları

- 30 Watt güç yeni uygulama alanı sağlar
- Üç anahtarlı ayak pedalı eller serbest iş akışına izin verir
- İdeal, yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Isınma süresinin ortadan kaldırılmasıyla hızlı kurulum



WE'RE ALL ABOUT PEOPLE.

Şirket Merkezi

Dornier MedTech GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling
Almanya

Asya/Pasifik

Dornier MedTech Asia Pte. Ltd.
51 Corporation Road
Singapur 649806
Telefon: +65-6665-5788
Faks: +65-6665 6711
E-posta:
infoasia@dornier.com

Japonya

Dornier MedTech Japan
Meguro Estate Building
3-8-5 Kami-Ohsaki
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Japonya
Telefon: +81-3-3280 3550
Faks: +81-3-3280 3555
E-posta:
info@domedtech.co.jp

Avrupa

Dornier MedTech Europe GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling
Almanya
Telefon: +49-8153-888 625
Faks: +49-8153-888 444
E-posta: infoeurope@dornier.com

Dornier MedTech Italia s.r.l.
Via Arrigo Cavaglieri N. 26
00173 Roma
İtalya
Telefon: +39-06-72 35 289
Faks: +39-06-72 35 302

Dornier MedTech Espana
Pedro Y Pons 9-11
Edificio Masters
E-08034 Barselona
İspanya
Telefon: +34-93-203 9316
Faks: +34-93-205 3814

Dornier MedTech France SARL
Ferme de St Paul
1545 route d'Epagny
F - 74330 Sillingy
Fransa
Telefon: +33-4-50 22 18 94
Faks: +33-4-50 24 24 53

Dornier MedTech Europe GmbH
Moskova Temsilciliği Uliza
Mytnaya 3
Office 21
119049 Moskova
Rusya
Telefon: +7-495-230 29 94
Faks: +7-495-739 51 33